



PHARMATECHNIK

Das Beste für Ihre Apotheke!

IXOS^{PT}

Version 2020.10

Versionsbeschreibung

Inhalt

1 Kasse	4
1.1 T-Rezept: Hinweis bei Abgabe mehrerer Medikationen mit teratogenen Wirkstoffen	4
1.2 Pflegehilfsmittel: Abrechnungszeitraum ändern	4
1.3 Auseinzelung: Angabe der herzustellenden Einheit	6
1.4 Eigene Rechenregeln für Auseinzelungen erstellen	6
1.5 Verwendete Rechenregel bei Auseinzelung nachvollziehbar	10
1.6 Konfiguration der Preisermittlung Aufschlagskalkulation und Artikelstamm +V	10
1.7 Hinweismeldung auf Dokumentationspflicht bei TFG-Produkten und Tierarzneimitteln	11
1.8 Neue Hinweismeldung auf Unsicherheit wegen Erstattungsfähigkeit	11
1.9 Erstellen von Lastschriften und Reihenfolge der abgeprüften Konten	12
2 Faktura	13
2.1 EPC-QR-Code auf Rechnung drucken	13
3 Artikelverwaltung	14
3.1 Alle Spaltenüberschriften in Artikeltrefferlisten verfügen über Tooltips	14
3.2 Optimierung der Seite 'Preisgestaltung'	15
3.3 Anzahl Heim-/Kundenetiketten in Abhängigkeit von der Darreichungsform oder pro Artikel festlegen	15
4 Rezepturen	17
4.1 Mengeneingabe auf 5 Nachkommastellen erweitert	17
4.2 Sortierreihenfolge in der Tabellenansicht "Rezepturen"	17
5 Kontakte	18
5.1 Arztkontakte: Auswahl der Fachrichtungen erweitert	18
5.2 Option "Kontakt austauschen" für Kontaktrollenänderung aktivieren/deaktivieren	18
5.3 Kontaktrollenänderung vom Laufkunden zum Kunden - automatisches Verwalten der Einwilligungserklärung	18
5.4 Dropdown-Menü "Lastschrift an Firmenkonto" mit Eintrag <keine Angabe> zum Überschreiben einer Einstellung	19
6 Warenlogistik	20
6.1 Lieferantenkonditionen: Erweiterung der Seite 'Gebühren'	20
6.2 Archiv: Ausweisung der im Buchungswert enthaltenen Gebühren	20
6.3 MSV3-Dienstanbieter	21
6.4 Preislistendruck für manuelle Preisauszeichnung	21
7 Medikationsmanagement	23
7.1 Neuer Systemparameter "Medikationsplan - ABDA-Indikation automatisch zuordnen" ..	23
8 Dokumentationsverwaltung	25
8.1 Erweiterung der Blutprodukt-Dokumentation um Hämophilieprodukte	25
8.2 Einheitliche Erweiterung der Dokumentationsbenennung von "Blutprodukt" in "Blut- und Hämophilieprodukt" oder Verwendung der Kurzform "TFG"	25
8.3 Dokumentation von Arzneimitteln zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie	25
8.4	25
8.5 Ausdruck der Blut- und Hämophilieprodukt-Dokumentation für den Arzt	25
9 Auswertungen	27
9.1 Entfernen der Mehrwertsteuerangaben in der Eingabemaske und Modifizieren der Ausdrücke für Sammelbelege	27
9.2 Hintergrundinformation	27
10 Reports	28

10.1 Reports Live durch Reports Remote abgelöst	28
10.2 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung	28
11 DATEV	31
11.1 Neue Steuerschlüssel nach DATEV-Vorgaben	31
12 Systemeinstellungen	32
12.1 Reihenfolge der Berechnungsbasis im Auswahlfenster "Bevorzuge Berechnungsbasis" geändert	32
13 App "Meine Apotheke"	33
13.1 Rezept Abo für Dauermedikationen aktivieren	33
13.2 Auswertung aller registrierter App-Kunden	33
13.3 QR-Code auf Kassenbon optimiert	33
13.4 QR-Code zu Werbezwecken exportfähig	34
14 Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt	36
14.1 Aktuelles zu den eRezept Modellprojekten	36
14.2 Aktuelles zum Konjunkturpaket MwSt-Senkung	36
14.3 Änderung im Arbeitsablauf aufgrund der Corona-Situation	36
14.4 Aktuelles zur Telematikinfrastruktur	36
14.5 Aktuelles zur Kassensicherungsverordnung	36
15 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	38

1 Kasse

1.1 T-Rezept: Hinweis bei Abgabe mehrerer Medikationen mit teratogenen Wirkstoffen


Modul: Kasse

Anwendungsfall: Artikel mit teratogenen Wirkstoffen abgeben

Neu/geändert:

Arzneimittel, welche teratogene Wirkstoffe enthalten, dürfen nur **alleine** auf einem T-Rezept verordnet werden. Die Abgabe einer weiteren Medikation im gleichen Subtotal wird mit einer Aktionsmeldung verhindert.

IXOS unterstützt Sie bei der Lösung und bietet an, für den weiteren erfassten Artikel ein neues Subtotal zu öffnen.

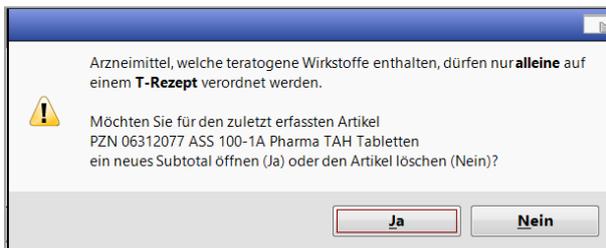

Bestätigen Sie diesen Vorschlag mit **Ja**, wenn der Vorgang vorgenommen werden soll.

Wählen Sie **Nein**, dann wird die zweite Position gelöscht.

Die Erfassung von Gebühren und generischen Artikeln (Sonderkennzeichen 'Ohne PZN') ist weiterhin möglich.

1.2 Pflegehilfsmittel: Abrechnungszeitraum ändern

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Pflegehilfsmittel: Abrechnungszeitraum ändern

Neu/geändert:

Die Krankenkasse fordert die genaue Angabe des Abrechnungszeitraums bei der Abgabe von Pflegehilfsmitteln. Die Angabe des Monats reicht nicht aus. Damit Sie das genaue Abgabedatum erfassen können, bietet IXOS jetzt das neue Feld **Abgabedatum für Versorgungszeitraum** mit einer Kalenderfunktion an. Nach Eingabe des Abgabedatums wird das Feld **Gewählter Abr.-Monat** automatisch befüllt.

Neue Abgaben		Abgabedatum für Versorgungszeitraum 09.07.2020							
Artikelbezeichnung		Gewählter Abr.-Monat Juli 2020							
Bezeichnung	PZN	EK (Brutto)	Einheit	Menge	VK	Anzahl	Abr.-Preis		
Saugende Bettschutzeinlagen - Einmalgebrauch (Höchstpreis 50 St / 21,54 €)				1		25	10,77		
BETTSCHUTZAUFILA 60X40CM 8L	10830027	5,41	25St	1	10,77	25	10,77		
Einmalhandschuhe (Höchstpreis 100 St / 7,18 €)				1		100	7,18		
EINMAL HANDSCH VIN PUDF S	00990296	4,25	100St	1	7,18	100	7,18		
Händedesinfektionsmittel (Höchstpreis 500 ml / 8,21 €)				1		500	8,21		
HAENDEDESINFEKT FLUE SPEND	11886171	3,49	500ml	1	8,21	500	8,21		
Fingerlinge (Höchstpreis 100 St / 5,64 €)				1		100	5,64		
FINGERLINGE AUS LATEX GR 3	06617894	1,65	100St	1	5,64	100	5,64		
Ertrag				17,00 €	Abrechnung gesamt				31,80 €

Strg	Artikel suchen	Artikel löschen	Erneut abgeben	Bisherige ausblenden	Gruppe zuordnen		Genehmig. verwalten	Übernehmen
Alt	F2	F4	F5	F6	F7		F10	F12

1.3 Auseinzelung: Angabe der herzustellenden Einheit

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Abgabe von Auseinzelungen

Neu/geändert:

Wenn eine Verordnung Auseinzelung oder Wochenblister vorsieht, können Sie diese an der Kasse mit dem Button **Sonder-Position**, der Funktion **Sonder-Position - Strg+F6** oder mit der Sonder-PZN **02567053** erfassen.

Das Feld **herzustellende Einheit** ist bereits mit dem korrekten Wert **1** vorbelegt. Eine Änderung des Wertes zur Angabe im Hash Code ist nicht notwendig. Um Retaxierungen zu vermeiden, ist dieses Feld nun nicht mehr editierbar.


1.4 Eigene Rechenregeln für Auseinzelungen erstellen

Modul: Kasse, Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Preisberechnung von Auseinzelungen

Neu/geändert:

Die Berechnungsfaktoren zur Preisberechnung bei Auseinzelung ist von den einzelnen Krankenkassen vorgegeben und individuell. Daher mussten Sie bisher die Berechnung der Abrechnungspreise manuell vornehmen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, eigene Rechenregeln als Basis zur Preisberechnung zu definieren.

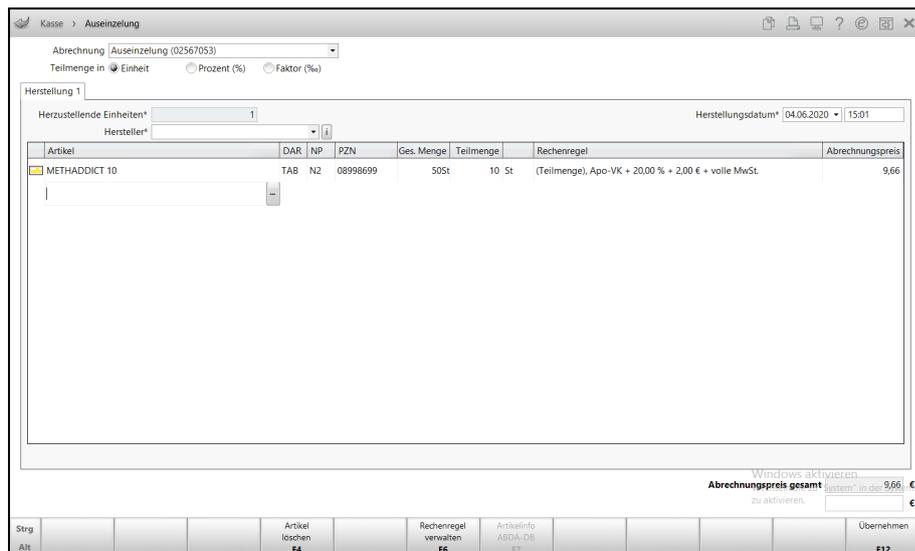

Die Tabelle der Herstellung wurde aufgrund dessen überarbeitet und stellt sich nun folgendermaßen dar:

Icon	Abgabebestimmungen
Artikel	Artikelbezeichnung.
DAR	Darreichungsform-Kennzeichen
NP	Normpackungsgröße
Ges. Menge	Gesamtmenge
Teilmenge	Teilmenge der Auseinzelung, die Sie abverkaufen.
Rechenregel	Definition der Rechenregel
Abrechnungspreis	Angabe des ermittelten Abrechnungspreises, aufgrund der gewählten Rechenregel.

Rechenregel auswählen

Über den Browse-Button  in der Spalte **Rechenregel** wählen Sie die gewünschte Rechenregel aus.

➡ Das Fenster **Rechenregel auswählen** öffnet sich.

Bezeichnung	Definition	Ermittelter Abrechnungspreis	
<input type="checkbox"/> EK+100%	(Teilmenge), Apo-EK + 100% + volle MwSt.	5,95	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EK+40%	(Teilmenge), Apo-EK + 40 % + volle MwSt.	4,17	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EK+50%	(Teilmenge), Apo-EK + 50 % + volle MwSt.	4,46	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> VK anteilig	(Teilmenge), Apo-VK + keine MwSt.	5,10	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> DAK	(Teilmenge), Apo-VK + 20,00 % + 2,00 € + volle	9,66	<input checked="" type="checkbox"/>

PZN	08998699	Effektiver EK		Apo-VK	25,48
Apo-EK	12,48	Durchschnitts-E		Eigener VK	
Eigener EK		Anbieterpreis	11,42	UNP	
Buchungs-EK		Krankenhaus-E			

Im Bereich **Info** sehen Sie Details zu den Artikelpreisen sowie im Reiter **Preisberechnung** die Zusammensetzung der Berechnungsfaktoren zur Ermittlung des Abrechnungspreises der markierten Rechenregel.

Die vom System hinterlegten Rechenregeln sind mit dem Icon gekennzeichnet. Sie können diese als Standard definieren und einen Infotext hinterlegen. Das Löschen der vordefinierten Rechenregeln ist nicht möglich.

Preisberechnung für Abrechnungspreis:

- 25,48 € (Apo-VK)
- + 10/50 (Teilmenge)
- + 1,2000 (Aufschlagsfaktor 20,00%)
- + 2,00 € (Euroaufschlag)
- + 1,19 € (Faktor MwSt.)
- = 9,66 €

Möchten Sie eine Rechenregel für zukünftige Auseinandersetzungen als Standard definieren, aktivieren Sie die Checkbox in der letzten Spalte der Übersichtstabelle.

Bei Eintragung des Artikels sowie der Teilmenge in der Herstellung wird die Standard-Regel automatisch eingetragen, die Auswahl der Rechenregel entfällt.

Markieren Sie die gewünschte Rechenregel und übernehmen diese mit **OK - F12** in die Herstellung.

Neue Rechenregel erstellen

Vom Fenster **Rechenregel auswählen** aus starten Sie die Neuanlage einer Rechenregel mit der Funktion **Neu - F3**.

➡ Das Fenster **Rechenregel bearbeiten** öffnet sich.

The screenshot shows the 'Rechenregel bearbeiten' dialog box. At the top, there are tabs for 'Bezeichnung', 'Rechentyp', and 'Definition'. The 'Definition' tab is active, showing the calculation rule: '(Teilmenge), Apo-VK + 20,00 % + 2,00 € + volle MwSt.'. Below this, there are input fields for 'Bezeichnung*' (containing 'DAK'), 'Definition der Rechenregel' (containing '(Teilmenge), Apo-VK + 20,00 % + 2,00 € + volle MwSt.'), and 'Info' (containing 'DAK'). There are several checkboxes: 'Anzeige in Auswahlliste' (checked), 'Als Standard-Regel festlegen' (checked), and 'ausgehend von*' (checked). There are also dropdown menus for 'ausgehend von*' (set to 'Teilmenge'), 'Berechnungsbasis*' (set to 'Apo-VK'), and 'MwSt.' (set to 'volle MwSt.'). Text input fields are present for '%-Aufschlag' (20,00 %) and '€-Aufschlag' (2,00 €). At the bottom, there are buttons for 'Speichern' (F1), 'OK' (F12), and 'Abbrechen' (Esc).

Hier nehmen Sie folgende Einträge vor:

Bezeichnung	Geben Sie hier eine aussagekräftige Bezeichnung für die Rechenregel ein.
Definition der Rechenregel	Nachdem Sie die Rechenregel gespeichert haben, sind hier die einzelnen Berechnungsfaktoren ersichtlich.
Info	In diesem Freitextfeld können Sie optional Informationen hinterlegen, bspw. die Krankenkasse, für die diese Rechenregel gilt.
Anzeige in Auswahlliste	Damit diese Rechenregel in der Auswahlliste angezeigt wird, aktivieren Sie die Checkbox.
ausgehend von	Wählen Sie im DropDown Menü aus, ob sich die Rechenregel auf die Teilmenge oder die Gesamtmenge bezieht.
Berechnungsbasis	Definieren Sie hier die Berechnungsbasis
%-Aufschlag	Hier geben Sie den prozentualen Aufschlag ein
€-Aufschlag	Hier geben Sie den Preisaufschlag ein.
MwSt	Wählen Sie über das DropDown Menü aus, ob eine MwSt. berechnet werden soll. Geht die Rechenregel von der Gesamtmenge aus, sollten Sie keine MwSt auswählen, um eine doppelte Berechnung zu verhindern.
Als Standard-Regel festlegen	Möchten Sie diese Rechenregel als Standard definieren, aktivieren Sie die Checkbox. Sie haben darüber hinaus auch zu einem späteren Zeitpunkt in der Rechenregel-Auswahl die Möglichkeit, diese als Standard zu definieren.

1.5 Verwendete Rechenregel bei Auseinzelung nachvollziehbar

Modul: Kasse, Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Preisberechnung von Auseinzelungen nachvollziehen

Neu/geändert:

Die verwendete Rechenregel zur Ermittlung des Abrechnungspreises einer Auseinzelung können Sie ab sofort im Detail nachvollziehen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

In der Verkaufsverwaltung markieren Sie die entsprechende Artikelposition und wählen die Funktion **Details - F8**.

➔ Das Fenster **Detailangaben Auseinzelung** öffnet sich.

PZN	Artikelbezeichnung	Teilmenge	verwendete Rechenregel	Abrechnungspreis
08998699	METHADDICT 10	10 (Teilmenge)	Apo-VK + 20,00% + 2,00 € + volle MwSt	9,66

Abrechnungspreis gesamt 9,66 €

OK
F12

1.6 Konfiguration der Preisermittlung Aufschlagskalkulation und Artikelstamm +V

Modul: Kasse, Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Berechnungsbasis konfigurieren

Neu/geändert:

Damit zur Preisberechnung der Aufschlagskalkulation sowie des Artikelstamms +V unterschiedliche Berechnungsbasen verwendet werden können, wurde der bestehende Konfigurationsparameter jetzt getrennt.

Ab sofort stellen Sie die Berechnungsbasis mit diesen Konfigurationsparametern ein:

Preisermittlung allgemein:

Aufschlagskalkulation bevorzugte Berechnungsbasis

Preisermittlung Artikelstamm + V:

Bevorzugte Berechnungsbasis A+V Preisdifferenz

- Durchschnitts-EK
- Buchungs-EK
- Effektiver EK

- Apo-EK
- Eigener EK

1.7 Hinweismeldung auf Dokumentationspflicht bei TFG-Produkten und Tierarzneimitteln

Modul: Kasse, Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Warnhinweis aktivieren

Neu/geändert:

Um sicherzustellen, dass bei Abgabe von Blutprodukten oder Tierarzneimitteln die Dokumentationspflicht eingehalten wird, sind die Systemeinstellungen um diesen Parameter ergänzt worden.

The screenshot shows a software interface with a left-hand navigation menu and a main settings area. The navigation menu includes 'Hinweise/Abfragen' (highlighted), 'Interaktionen', 'Kassenabschluss', 'Preisermittlung', 'Rezeptdruck', and 'Rezeptmanagement'. The main settings area contains several options with checkboxes and input fields:

- Doppelmedikations-Check bei Kundenneuanlage
- Zeitraum Prüfung von Doppelmedikation [Tage]
- Hinweis bei Nichtabgabe preisgünstiger Import
- Info bei Med.-Abbruch Grund "station. Aufenthalt"
- Warnung bei fehlender Arztunterschrift
- Hinweis Dokupflicht TFG-Produkte/ Tierarzneimittel**

Wird dieser Parameter aktiviert, so erscheinen bei Verkauf der jeweiligen Produkte die entsprechenden Hinweismeldungen.

1.8 Neue Hinweismeldung auf Unsicherheit wegen Erstattungsfähigkeit

Modul: Kasse


Anwendungsfall: Verkauf von Artikeln, die nicht apothekenpflichtig sind oder die keine gültige Normpackungsgröße besitzen oder die auf einer Negativliste stehen oder bei denen es sich um Lifestylemedikament handelt.

Neu/geändert:

Beim Verkauf von Artikeln, die folgende Bedingungen erfüllen, erscheint eine neue Hinweismeldung:

- Artikel ist nicht apothekenpflichtig
- Artikel besitzt keine gültige Normpackungsgröße
- Artikel steht auf Negativliste
- Artikel ist ein Lifestyle-Medikament

Um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Abgabe einer dieser Artikel möglicherweise zu Problemen bei der Erstattung führt, haben wir folgenden Hinweismeldung eingeführt:

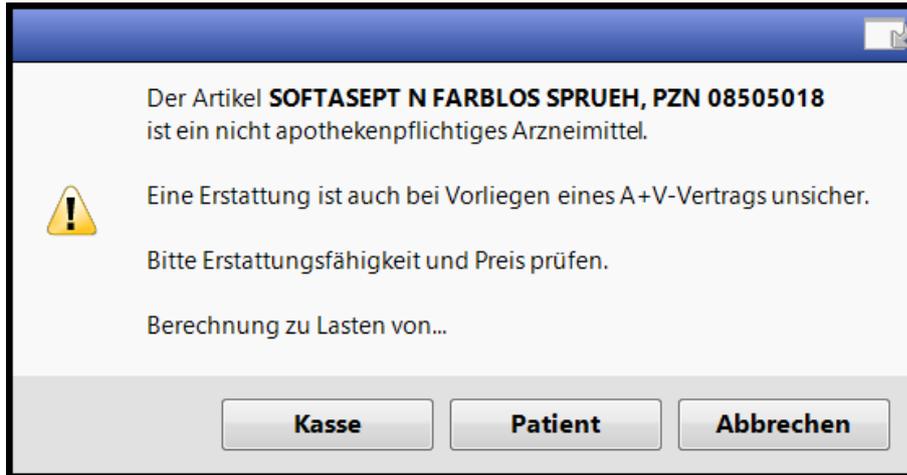

Beispiel einer Hinweismeldung

1.9 Erstellen von Lastschriften und Reihenfolge der abgeprüften Konten

Modul: Kasse, Faktura/Zahlungsverkehr

Anwendungsfall: Lastschrift erstellen

Neu/geändert:

Lastschrift an Firmenkonto: Wenn Ihnen für diesen Kontakt eine Lastschrift-Ein-
zugsermächtigung vorliegt, stellen Sie hier das im **Firmenstamm** auf der Seite **Finanzen** hin-
terlegte Konto Ihrer Apotheke ein, auf das die Beträge eingezogen werden sollen. Falls Sie
für Ihre Apotheke im **Firmenstamm** mehrere Bankverbindungen hinterlegt haben, können
Sie damit auswählen, auf welches dieser Konten die Lastschrift von diesem Kunden ein-
gezogen werden soll.

Wenn Sie hier keine Auswahl treffen, dann wird zuerst das **Alternative Apothekenkonto** aus
dem Fakturamodell herangezogen (sofern eines angegeben ist). Wenn im Fakturamodell
kein **Alternatives Apothekenkonto** angegeben ist, dann erfolgt der Lastschrifteinzug auf
das im **Firmenstamm** eingestellte **Standardkonto**.

2 Faktura

2.1 EPC-QR-Code auf Rechnung drucken

Modul: Faktura, Druckformulare

Anwendungsfall: EPC-QR-Code auf Rechnung drucken


Neu/geändert:

Der auf einem Rechnungsformular angegebene EPC-QR-Code dient bei der Überweisung mittels Online-Banking Software oder einer mobilen Banking App als automatische Ausfüllhilfe der Online-Überweisungsformulare. Somit werden Fehler bei der manuellen Eintragung vermieden.

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, diesen EPC-QR-Code auf Ihre Rechnungen drucken, um Ihren Kunden eine einfache Zahlungsabwicklung anzubieten, sofern die Zahlungsweise **Überweisung** hinterlegt ist.

Den Aufdruck konfigurieren Sie im Modul **Druckformulare**:

1. Selektieren Sie das Druckformular **Rechnung** und wählen **Konfigurieren - F8**
2. Das modale Fenster **Rechnung konfigurieren** öffnet sich.

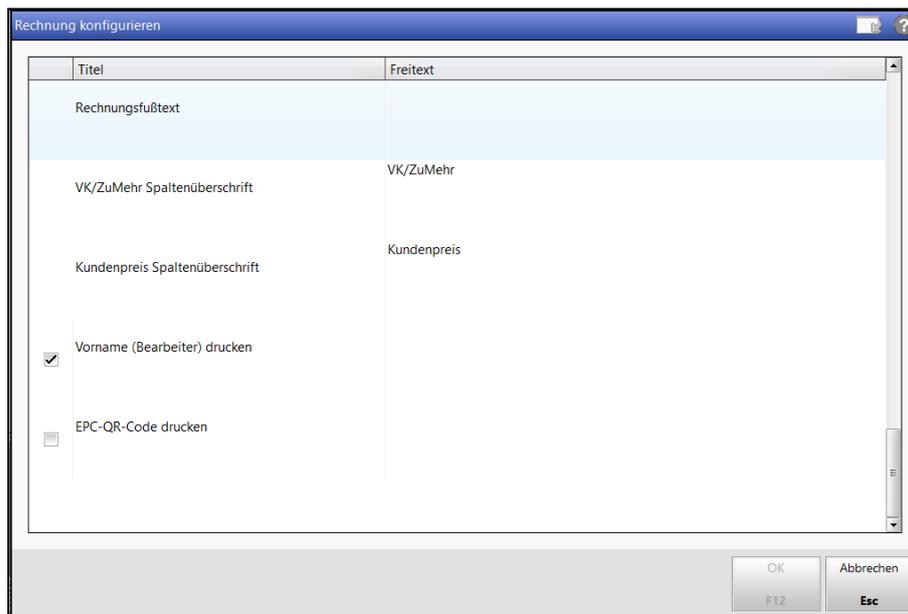

3. Aktivieren Sie die Option **EPC-QR-Code drucken** per Checkbox .
4. Mit **OK - F12** ist die Aktivierung gespeichert.



Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Bankverbindung sowie der Kontoinhaber vollständig hinterlegt ist. Anderenfalls kann der EPC-QR-Code nicht generiert werden.

Auf dem Rechnungsformular wird dieser Code im Summenteil aufgedruckt mit der Erläuterung '**Zahlen mit Code**'.

3 Artikelverwaltung


3.1 Alle Spaltenüberschriften in Artikelrefferlisten verfügen über Tooltips

Modul: Artikelverwaltung, Kasse

Anwendungsfall: Artikelsuche, Artikeldetails

Neu/geändert:

Alle Spaltenüberschriften verfügen jetzt über Tooltips.

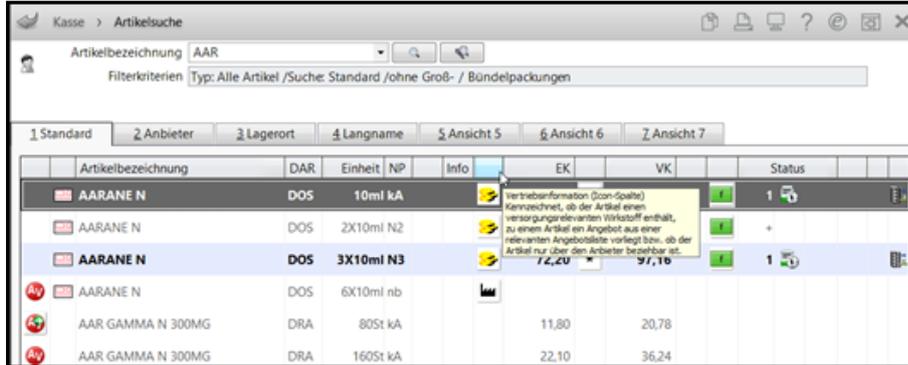


Preiserläuterung in der Spalte VK über Tooltip

Modul: Artikelverwaltung, Kasse

Anwendungsfall: Artikelsuche, Artikeldetails

Neu/geändert:

In der Artikelrefferliste ist in der Spalte **VK** immer der im Verkauf aktuell gültige Preis ersichtlich. Dabei handelt es sich um den regulären Preis entsprechend UVP, den Apo-VK, den Eigenen -VK oder um aktuelle Sonderpreise. Aufgrund der MwSt-Anpassung kann dieser Preis um die MwSt-Differenz reduziert sein.

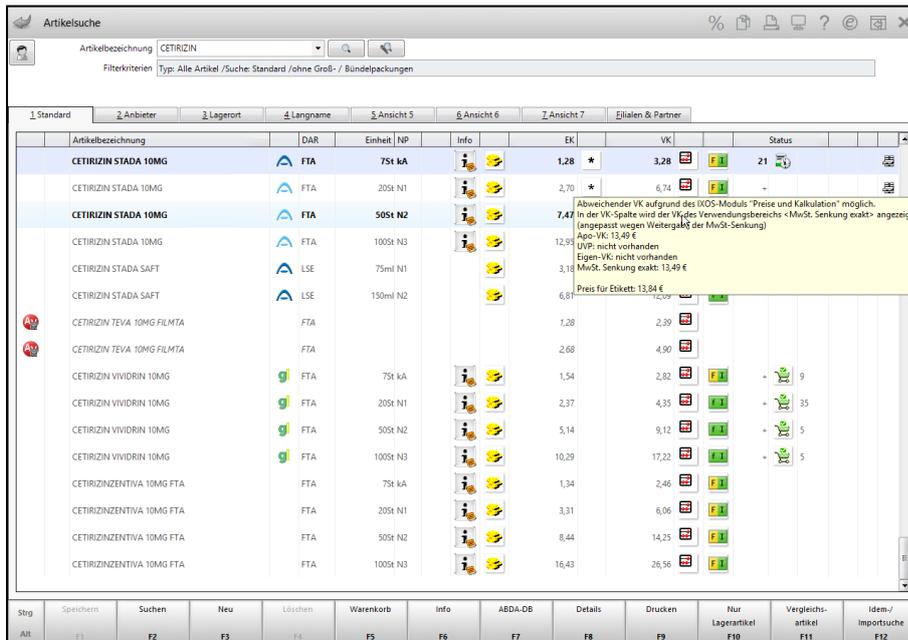

3.2 Optimierung der Seite 'Preisgestaltung'

Modul: Artikelverwaltung, Preisgestaltung

Anwendungsfall: Preisinformationen einsehen

Neu/geändert:

Das Feld **Rabattierung** wurde umbenannt in **Rabattierung Eigener VK**, um den Bezug zum eigenen Verkaufspreis herzustellen.

The screenshot displays the 'Preisgestaltung' window for the article 'ASPIRIN COMPLEX Btl.m.Gran.z.Herst.e.'. The main area is divided into several sections:

- ABDA-Preise:** Apo-EK (8,57), Apo-VK (14,77), Anbieterpreis (ApU) (7,26), Unverb. Preisempf., Mehrwertsteuer (Voll).
- Eigene Preise:** Eigener EK (6,79), Eigener VK, Rabattierung Eigener VK (set to 'zulassen'), Rechenregel, and Preis für Etikett (14,77, 0,74 € / St).
- Letzte Einkaufspreise:** Buchungs-EK (6,79), Effektiver EK (6,79), Durchschnitts-EK (6,77).
- Other Fields:** Filial- & Partnerauswahl (eigene Apotheke), Rohertrag (5,96), Aufschlag (88,04%), and Spanne (46,82%).

At the bottom, there is a 'Preisliste' table with columns: Gültig von, Gültig bis, Preisliste, Herkunft, Rohertrag, Aufschlag %, Spanne %, EK, and VK. The table is currently empty.

Zusätzlich zur Angabe des Grundpreises sehen Sie nun auch die Angabe **Preis für Etiketten**. Dies ist der Preis auf dem Preisniveau der Preise vor der Senkung der MwSt., der für die Preisauszeichnung benötigt wird. Der **Preis für Etiketten** ist darüber hinaus auch in der Artikeltrefferliste über den Tooltip in der Spalte **VK** ersichtlich.

3.3 Anzahl Heim-/Kundenetiketten in Abhängigkeit von der Darreichungsform oder pro Artikel festlegen

Modul: Artikelverwaltung, Lagerdaten

Anwendungsfall: Anzahl zu druckender Etiketten festlegen

Neu/geändert:

Im Fenster Lagerdaten gibt es die neue Gruppe **Heim-/Kundenetiketten**.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Status	Verfall	Bestand	Res.Mg	
KATHETER Absaug 60 cm Ch 16 geboger	KAT	1St	nb	03200805	POS		2000		1

ABDA-Basisinfo ABDA-Abgabeinfo ABDA-Vertriebsinfo ABDA-Lagerinfo ABDA-Änderungsinfo Einkauf / Retoure Einkauf / Angebote Verkauf Bedarfsstatistik Bestelloptimierung Preisgestaltung Lagerdaten Rabattvereinbarungen	Lagerdaten	
	Status/Statusdatum	POS 05.06.2020
	Lagerort	
	Kurzcode	
	Reservierte Menge	
	Notdienstbestand	
	Bereitschaftsbestand	
	Bestand	Verfall
		2000
	Bevorzugt abzugeben	<input type="checkbox"/>
Verfallartikel	<input type="checkbox"/>	
Ladenhüter	<input type="checkbox"/>	
GTIN/EAN		
Artikelklassifizierung		
Dauersortiment	<input type="checkbox"/>	
Dienstleistung	<input type="checkbox"/>	
Wertgutschein	<input type="checkbox"/>	
Blisterinformationen		
Kennzeichen	Automatisch	
Im Blisterautomat	<input type="checkbox"/>	
Inventurwerte		
Permanente Inventur		
Jahresinventur		
Lagerwertermittlung		
Menge / Wert		
Menge / Wert		
Menge / Wert		
	pro Stück	
	pro Stück	
	pro Stück	
Heim-/Kundenetiketten		
Druckeinstellung	abweichend für diesen Artikel	
	1 Etikett(en) pro Packung	

Hier legen Sie fest,

- wie viele Etiketten (**Anzahl**) Sie ausdrucken wollen ,
- ob Sie den Ausdruck an die **Darreichungsform** binden wollen und
- ob Sie pro **Packung** oder **Position** drucken wollen.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Status	Verfall	Bestand	Res.Mg	
KATHETER Absaug 60 cm Ch 16 geboger	KAT	1St	nb	03200805	POS		2000		1

Bestelloptimierung	Blisterinformationen		Heim-/Kundenetiketten	
	Kennzeichen	Automatisch	Druckeinstellung	aus Darreichungsform (KAT)
	Im Blisterautomat	<input type="checkbox"/>		1 Etikett(en) pro Position
Preisgestaltung				

4 Rezepturen

4.1 Mengeneingabe auf 5 Nachkommastellen erweitert

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Mengeneingabe in

Neu/geändert:

Sofern die einzugebende Menge mit der Einheit g unter 1g beträgt, sind jetzt Eintragungen mit 5 Nachkommastellen möglich.

In den Spalten der Mengenangaben in der Übersichtstabelle sind die Nachkommastellen auf 4 begrenzt. Haben Sie 5 Nachkommastellen eingegeben, findet eine Rundung statt.

Bestandteil	AA/AD	Mengeneingabe	Einheit	Menge g	Menge ml	Preis	Pa	
ESTRADIOL 17 ALPHA		0,00125 g		0,0013	0,0013	87,21	1	K
BASISCREME	ad	50,0000 g		49,9988	49,9988	12,73	1	K

Bei inkorrekten Eingaben erhalten Sie eine konkrete Hinweismeldung.

4.2 Sortierreihenfolge in der Tabellenansicht "Rezepturen"

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Rezepturübersicht sortieren

Neu/geändert:

Die Tabellenansicht der Rezepturen lässt sich durch Anklicken der Spaltenüberschrift Bezeichnung, Gesamtmenge, Datum (Herstellungsdatum), Kategorie (Vorlage / Herstellung), P (Icon Plausibilitätsprüfung), H (Icon Herstellungsprotokoll), A (Icon Herstellungsanweisung) und Status sortieren.

Dabei wird auf- oder absteigend sortiert.

Sortieren Sie nach der **Bezeichnung**, so werden die darauffolgenden Spalten

Gesamtmenge, Kategorie und **Herstellungsdatum** ebenfalls berücksichtigt.

Sortieren Sie nach der **Gesamtmenge**, so werden die darauffolgenden Spalten

Bezeichnung, Kategorie und **Herstellungsdatum** ebenfalls berücksichtigt.

5 Kontakte

5.1 Arztkontakte: Auswahl der Fachrichtungen erweitert

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Fachrichtung auswählen

Neu/geändert:

Bei der Anlage oder Verwaltung eines Arzt-Kontaktes stehen Ihnen ab sofort zusätzlich folgende Fachrichtungen zur Auswahl:

- **Diabetologie**, mit dem Kürzel DBT
- **Palliativmedizin**, mit dem Kürzel PAL

Die im DropDown Menü gelisteten Fachrichtungen stellen sich alphabetisch dar.

5.2 Option "Kontakt austauschen" für Kontaktrollenänderung aktivieren/deaktivieren

Modul: Kontakte,

Anwendungsfall: Kontaktrolle ändern

Neu/geändert:

Für Apotheken im Filial- und Partnerapothekenverbund können Sie jetzt festlegen, ob eine Kontaktrollenänderung eines Kunden (z. B. Laufkunde zu Kunde) nur in der aktuellen Apotheke oder auch in allen angeschlossenen Apotheken gilt. Dazu müssen Sie den Kundenparameter **Kontakt austauschen** im Fenster **Stammdaten** aktivieren.

Aktivieren Sie dazu die Option Kontaktaustausch automatisch zulassen.

5.3 Kontaktrollenänderung vom Laufkunden zum Kunden - automatisches Verwalten der Einwilligungserklärung

Modul: Kontakte,

Anwendungsfall: Kontaktrolle ändern

Neu/geändert:

Bei einer Kontaktrollenänderung vom Laufkunden zum Kunden erscheint nun automatisch die Hinweismeldung auf eine fehlende Einwilligungserklärung (Einwilligung zur Datenspeicherung) des ausgewählten Kunden.

Voraussetzung: Die Option Hinweismeldung Einwilligungserklärung ist aktiviert.

Das Fenster Hinweismeldung Einwilligungserklärung wird auch beim Ändern eines Adressbucheintrags zum Kunden geöffnet.

Ablauf bei einer Einzelapotheke:

Rufen Sie den Laufkunden auf, wählen Sie **Kontaktrolle ändern - F7**, ändern Sie die Kontaktrolle und bestätigen Sie mit **OK - F12**. Das Fenster **Einwilligungserklärung verwalten** wird automatisch geöffnet.

Ablauf im Filial- und Partnerapothekenverbund:

Voraussetzung: Die Option **Kontaktaustausch automatisch zulassen** ist aktiviert.

Ablauf: Rufen Sie den Laufkunden auf, wählen Sie **Kontaktrolle ändern - F7**, ändern Sie die Kontaktrolle und bestätigen Sie mit **OK - F12**. Das Fenster **Stammdaten** erscheint. Wenn Sie nun **Speichern** oder **F1** wählen, wird automatisch das Fenster **Einwilligungserklärung verwalten** geöffnet.


5.4 Dropdown-Menü "Lastschrift an Firmenkonto" mit Eintrag <keine Angabe> zum Überschreiben einer Einstellung

Modul: Kontakte,

Anwendungsfall: Lastschriftverfahren ändern

Neu/geändert:

Im Zahlungsverkehr kann jetzt der Eintrag **<keine Angabe>** im Dropdown-Menü neben dem Feld "Lastschrift an Firmenkonto" ausgewählt werden, z. B. um eine voreingestellte Kontonummer mit einem Leereintrag zu überschreiben.

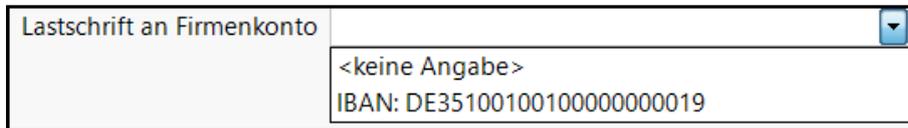

The image shows a screenshot of a software interface. On the left, there is a label 'Lastschrift an Firmenkonto'. To its right is a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: '<keine Angabe>' and 'IBAN: DE35100100100000000019'. The option '<keine Angabe>' is currently selected and highlighted.

6 Warenlogistik

6.1 Lieferantenkonditionen: Erweiterung der Seite 'Gebühren'

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Gebühren in den Lieferantenkonditionen hinterlegen

Neu/geändert:

In den Kontaktdaten von Lieferanten pflegen Sie die Konditionsvereinbarungen mit den einzelnen Lieferanten. Auf der Seite **Gebühren** hinterlegen Sie die mit dem Lieferanten vereinbarten Gebühren. Diese Seite wurde überarbeitet und stellt sich nun folgendermaßen dar:

Neu sind die Felder zur Erfassung von Gebühren für:

- **Kühlkettenpflichtige Artikel**
- **Retoure - pro Auftrag oder pro Position**
- **Dispositionsauftrag**
- **Sonderlieferung/Extratour**
- **Aufträge unter Mindestbestellwert**
- **Aufträge unter Mindestpackungsanzahl**

Die Gebühren für Betäubungsmittel können Sie ab sofort sowohl pro Beleg als auch pro Position erfassen.

6.2 Archiv: Ausweisung der im Buchungswert enthaltenen Gebühren

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Im Buchungswert enthaltene Gebühren einsehen

Neu/geändert:

In der Übersicht des Archivs signalisiert Ihnen das neue Icon  in der letzten Spalte, dass im angegebenen Rechnungswert Gebühren enthalten sind. Die Höhe der Gebühren ist über den Tooltip ersichtlich.

The screenshot shows the 'Warenlogistik' application window. The main area displays a table of orders with columns: Name, Buchung, Beleg, Valuta, Belegnr., A.-Art, Pos, and Wert. The table contains four rows of data for 'Gehe' orders. Below the table, there are filter criteria for 'Zeitraum' (15.02.2020 - 15.05.2020) and 'Anzahl' (1). A 'Details' section shows 'Buchungsinformationen' with fields for 'Zeitpunkt' (15.05.2020 08:42), 'Mitarbeiter' (Hänel, Rommy), and 'Arbeitsplatz' (KAS106). At the bottom, there is a keyboard shortcut bar with buttons for 'Suchen' (F2), 'Bearbeiten' (F5), 'Info' (F6), 'Drucken' (F9), 'Lieferantenwechsel' (F10), and 'Bestellstatus' (F11).

Name	Buchung	Beleg	Valuta	Belegnr.	A.-Art	Pos	Wert
Gehe	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	34563456		7	95,98
Noweda	15.05.2020	09.05.2016	09.05.2016	7465746567		4	109,63
Gehe	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	32986495		2	-244,97
Gehe	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	s		1	96,00

In der Detailansicht eines archivierten Auftrags befindet sich dieses Icon im Header-Bereich.

6.3 MSV3-Dienstanbieter

Modul: Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: MSV3-Anbieter auf der Seite **Sendeparameter** einrichten

Neu/geändert:

Folgende Lieferanten bieten nun auch die Bestellung per MSV3 an, so dass Sie diese in IXOS als MSV3-Lieferanten nutzen können:

- Nimbus Health GmbH

Wenn Sie bei diesen Lieferanten bestellen, dann können Sie in der Kontaktverwaltung auf der Seite **Sendeparameter** die entsprechenden Zugangsdaten einrichten.

Online-Anfragen und Bestellungen bei dem MSV3-Anbieter Orifarm sind ab der Version 2020.10.40 ausschließlich mit dem Sendeprotokoll **MSV3 2.0** möglich. Der Dienst-Anbieter Orifarm ist im Dropdown-Feld MSV3-Dienstanbieter unter **MSV3 2.0 Orifarm** gelistet.

6.4 Preislistendruck für manuelle Preisauszeichnung

Modul: Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: Erstellen einer Artikelliste für die manuelle Preisauszeichnung

Neu/geändert:

Ein neues Formular **Preisliste für Preisauszeichnung** steht zur Verfügung, um eine Artikelliste mit Preisen zu erstellen.

Wenn Sie neue Ware auszeichnen wollen, zum Beispiel beim Auffüllen der Sicht- oder Freiwahl aus einem neuen Wareneingang oder Ware aus dem Übervorrat, gehen Sie wie folgt vor:

Erfassen Sie die Ware in einem Pseudo-Warenkorb über **Kontakte > Warenlogistik > F3 - Neu anlegen** (zum Beispiel „Preisetiketten“)

Anschließend wählen Sie im Reiter **Warenkorb** den **Auftrag** aus. Wählen Sie dann **F9 - Drucken**. Wählen Sie im folgenden Fenster **F9 - Etiketten**. Im Fenster **Druckauswahl Etiketten** stellen Sie den Etikettentyp auf **Preisliste für Preisauszeichnung** um. Aktivieren Sie **Anzahl > Feste Anzahl**, geben Sie **1** ein und bestätigen Sie mit **F12/OK**.

In der Anzeige erhalten Sie eine Liste, die den für Ihre Preisauszeichnung regulären Preis auf dem Preisniveau vor der Senkung der MwSt. enthält. Über diese Druckoption werden aktuell gültige Sonderpreise **nicht** berücksichtigt. Sie können die Liste auf DIN A4-Papier ausdrucken oder den Druck abrechnen.

Preisliste für Preisauszeichnung		
PZN	Name	Preis
13839365	CETAPHIL PRO IT CO GESICRE CRE 50ml	16,95 €
12892736	HEMLIBRA 30MG/ML (30MG) ILO 1ml	2.373,73 €
03966536	HERMES MULTIVIT BTA 6001	

WICHTIG: Löschen Sie anschließend den Warenkorb sofort wieder.

7 Medikationsmanagement


7.1 Neuer Systemparameter "Medikationsplan - ABDA-Indikation automatisch zuordnen"

Modul: Medikationsmanagement


Anwendungsfall: Medikationsplan erstellen

Neu/geändert:

In den Systemparametern für die Anwendung **Kontakte** wurde die neue Seite **Medikationsplan** mit dem Konfigurationsparameter "**ABDA-Indikation automatisch zuordnen**" hinzugefügt.

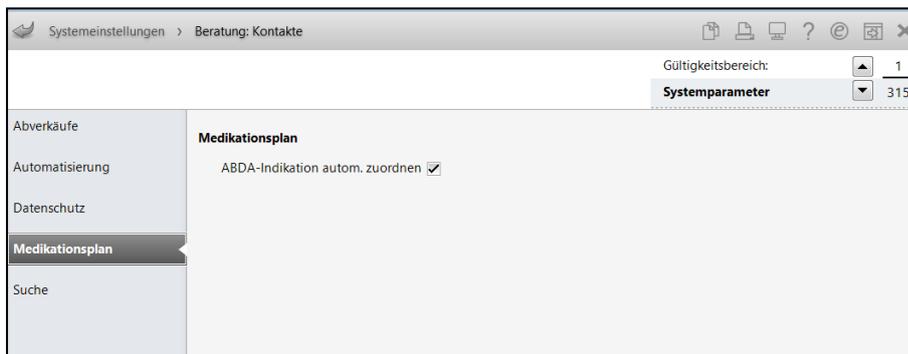

Dieser Parameter ist standardmäßig aktiv. Wird einem Kunden eine neue Medikation zugeordnet, so wird standardmäßig die erste ABDA-Indikation in den Verlaufsdetails in das Feld **Indikation** geschrieben.

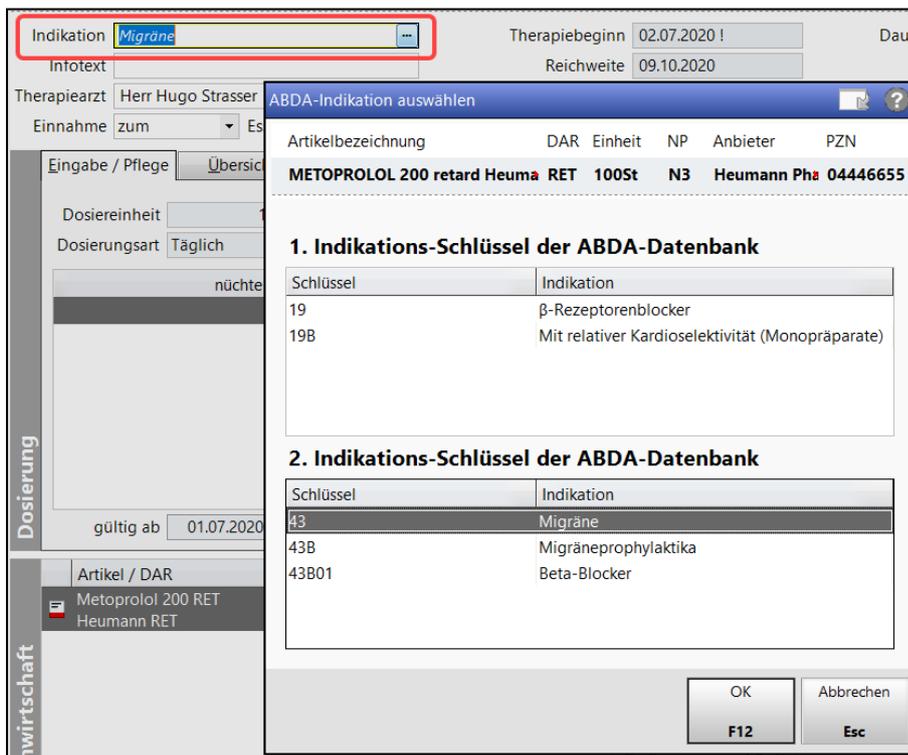

Sie können

- einen anderen Schlüssel auswählen (sofern die Datenbank mehr als einen Schlüssel anbietet) oder
- einen Oberbegriff oder eine Allgemeinbezeichnung oder Zusatzerläuterung per Hand in das Feld **Indikation** eintragen.

Diese Auswahl erscheint dann auch beim Ausdrucken des Medikationsplans.

Wenn Sie eine Medikation über die Einlesefunktion eines Bundesmedikationsplan zuordnen, so wird die Indikation des Bundesmedikationsplans übernommen. Enthält der Bundesmedikationsplan keine Indikation, so wird die erste ABDA-Indikation übernommen.

8 Dokumentationsverwaltung

8.1 Erweiterung der Blutprodukt-Dokumentation um Hämophilieprodukte

Kurz erklärt:

Die Dokumentationspflichten für Arzneimittel umfassen in der Apothekenbetriebsordnung neben den Blutprodukten auch Hämophilieprodukte. Um diese Tatsache im Dokumentationsmodul abzubilden, wurden die jeweiligen Fenstertitel um den Begriff "Hämophilieprodukte" erweitert und sind nun mit "Blut- und Hämophilieprodukt" überschrieben. In den Navigationsleisten verwenden wir das platzsparende Akronym "TFG".



8.2 Einheitliche Erweiterung der Dokumentationsbenennung von "Blutprodukt" in "Blut- und Hämophilieprodukt" oder Verwendung der Kurzform "TFG"

Modul: Dokumentation

Anwendungsfall: Dokumentation

Neu/geändert:

Benennung in der grafischen Bedienoberfläche, siehe auch Abbildung oben.

8.3 Dokumentation von Arzneimitteln zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie

Modul: Dokumentation

Anwendungsfall: Erstellen der Blut- und Hämophiliedokumentation

Neu/geändert:

Sie können nun neben der Blutprodukt-Dokumentation auch die Hämophilieprodukt-Dokumentation manuell oder automatisch erstellen - sowohl für die Apotheke als auch für den Arzt. Voraussetzung: die Kundenparameter zur automatischen Dokumentation von "TFG-Produkten und T-Rezepten" sowie zur automatischen Kunden- und Arztabfrage sind aktiviert.

8.4

Darüber hinaus ist das bisherige Filterkriterium "Blutprodukte" um das Filterkriterium "Hämophilieprodukte" erweitert worden:



8.5 Ausdruck der Blut- und Hämophilieprodukt-Dokumentation für den Arzt

Modul: Dokumentation

Anwendungsfall: Drucken der Blut- und Hämophilieprodukt-Dokumentation für den Arzt
Neu/geändert:

Nach neuer ApBetrVO muss an den verschreibenden Arzt folgendes übermittelt werden:

- Bezeichnung der Arzneimittels
- die Chargenbezeichnung und die Menge des Arzneimittels
- das Datum der Abgabe
- Patientenangaben!!!

Einzeldruck an der Kasse - F9 bei der Abgabe aus der Detailansicht - Screen unten

Mehrere Dokumentationen aus der Abgabe heraus - Arzt - Bild aus Powerpoint

Die Umsetzung erfolgt über die folgende neue Auswahlmöglichkeit:

Baumer Apotheke - Hirschberger Str. 84 - 00372 München				Datum: 06.07.2020			
Ausdruck der Blut- & Hämophilieproduktokumentation von: 06.07.2020 bis: 06.07.2020				Uhrzeit: 09:08			
				Seite: 1/1			
Datum	Zugang	Abgang	Artikelbezeichnung	Einheit	PZN	Lieferant/Empfänger	Verschreibender Arzt
06.07.2020	2		COAGADEX 250 I.E. BPL Bioproducts Laboratory GmbH	DAR	1S1 12392703 PLI 2584154	Anzag Dyggalski Allee 45 81477 München	

9 Auswertungen

9.1 Entfernen der Mehrwertsteuerangaben in der Eingabemaske und Modifizieren der Ausdrucke für Sammelbelege

Modul: Auswertungen

Anwendungsfall: Auswertungen erstellen

Neu/geändert:

In den Eingabemasken für AM Selbstmedikation, Einkäufe insgesamt, Verordnungen, Verordnungen und AM Selbstmedikation und Zuzahlungsliste sind die Angaben zur Mehrwertsteuer entfernt worden.

Vorher (mit MwSt):

Gesamt	40,30	Zuzahlung	0,00
Mehrwertsteuer (voll)	6,22	Mehrkosten	0,00
Mehrwertsteuer (ermäßigt)	0,09		

Datum	Filiale	PZN	Bezeichnung	DAR	Einheit	Menge	VK	Zuzahlung	Mehrk.	Gesamt
23.06.2020	BEE	03144975	SOLDAN AECHT BAY BLOCK ZER	BON	100 g	1	1,35	0,00	0,00	1,35

Aktuell:

Gesamt	81,98	Zuzahlung	10,00
		Mehrkosten	28,09

Datum	Filiale	PZN	Bezeichnung	DAR	Einheit	Menge	VK	Zuzahlung	Mehrk.	Gesamt
23.06.2020	BA	03295013	OXAZEPAM AL 10	TAB	50 St	1	12,40	5,00	0,00	5,00
23.06.2020	BA	03754691	BELOC ZOK 95MG	RET	100 St	1	45,48	5,00	28,09	33,09

9.2 Hintergrundinformation

Bei den oben genannten Listen ist die MwSt. nicht relevant, da

- diese Listen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigigen (dies kann nur durch die Einzelbelege erfolgen) und
- diese Listen rein informative Ausdrucke/Aufstellungen/Aufsummierungen über bezahlte Beträge sind.

Der **Verwendungszweck** der Listen:

- Einreichung bei der Kasse zum Nachweis für die Zuzahlungsbefreiung - hier ist nur der Betrag der geleisteten Zuzahlungen relevant
- Einreichung bei der Steuererklärung - dabei sind ebenfalls nur die geleisteten Zahlungen relevant und nicht der Steuersatz, zu denen diese erworben wurden relevant.
- Vorsteuerabzugsberechtigte: hierfür werden die Originalbelege benötigt.

Die zu den oben genannten Eingabemasken zugehörigen Druckstücke sind inhaltlich entsprechend angepasst und enthalten zusätzliche Layoutverbesserungen.

10 Reports

10.1 Reports Live durch Reports Remote abgelöst

Sofern Sie Teil eines Filialverbunds sind, nutzten Sie bisher im Menü  **Büro** den Eintrag



Reports-Live, um das Modul **Reports** einer anderen Partner- und Filialapotheke zu öffnen und Abfragen durchzuführen.

Da IXOS nun eine komfortablere Lösung per Remote anbietet, wurde diese Funktion entfernt.

Wie in der Version 2020.7 bereits beschrieben, wählen Sie hierfür jetzt in der IXOS Menüleiste das Menü  **Kooperation**.

10.2 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung

Modul: Reports

Anwendungsfall: Abfragen aufrufen, bearbeiten und verarbeiten


Neu/geändert:

Im Modul **Reports** stehen Ihnen folgende neue vordefinierte Abfragen, Felder oder Optionen der Ergebnisverarbeitung zur Verfügung:

- Ergebniskategorie **Verkäufe**
 - neues Feld unter **Positionsinformationen - Basisdaten: Preistypen-Auswahl** - bietet die Möglichkeit, Preistypen auszuwählen.



Treffen Sie Ihre Auswahl, welche Preistypen für diese Auswertung berücksichtigt werden soll.

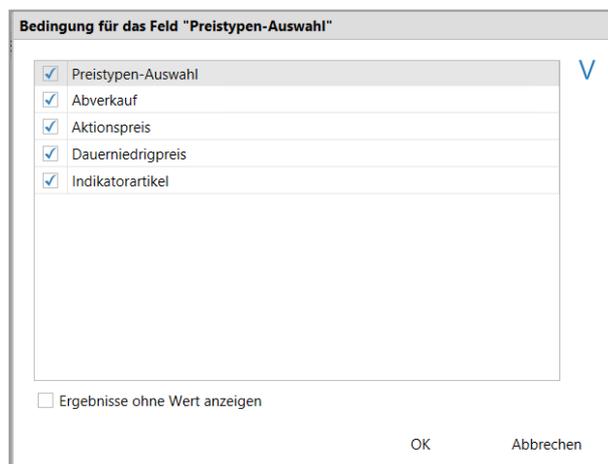

Darüber hinaus steht Ihnen die **Preistypen-Auswahl** auch als Filter in der Filterkategorie **Verkäufe** für spezielle Filtereinstellungen zur Verfügung.

Bedingungen für das Feld "Bezahlte Menge zum Vorgang"

ab 1	Heim und seine Bewohner	Egal	▼
	Heimeinheit	Egal	▼
	Kunde-Kostenstelle	Egal	▼
	Kunde-Kudentyp	<egal>	▼
	LANR	Egal	▼
	Mehrwertsteuer	<egal>	▼
	Mitarbeiter-Ausschluss	<egal>	▼
	Notdienstfonds-Beitrag zur Position	beliebiger...	▼
	Pflegehilfsmittel	<egal>	▼
	Positionstyp	<egal>	▼
	Preislisten-Auswahl	Egal	▼
	Preistypen-Auswahl	<egal>	▼
	Rezeptstatus	<egal>	▼
	Substitutions-Typ	<egal>	▼
	USt-Ausweisung a.R.	<egal>	▼
	Vereinbartes Sortiment	<egal>	▼
	Verkaufsart	<egal>	▼

Mehrfachauswahl Alle speziellen Filter zurücksetzen OK Abbrechen

• Ergebniskategorie **Artikel**

- neues Feld unter **Preisinformationen: Preistyp(Preisschema)** - bietet die Möglichkeit, Preistypen auszuwählen.

Preistyp (Preisschema)	Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Pack.Gr	Status
	ABC WAERME HANSAPLAST MED	0225437	DOS	10 ml	POS
	ABC WAERME HANSAPLAST MED	02295815	CRE	50 g	POS
	ABC WAERME HANSAPLAST MED	02295494	PFL	1 St	POS

Treffen Sie Ihre Auswahl, welches Preisschema für diese Auswertung berücksichtigt werden soll.

Bedingung für das Feld "Preistyp (Preisschema)"

Preisschema: Standard ▼

- Preistyp (Preisschema) ▼
- Abverkauf
- Aktion
- Dauerniedrigpreis
- Indikatorartikel

Ergebnisse ohne Wert anzeigen

OK Abbrechen

- Änderung der Gliederung des Abfrageergebnisses **Bestandsbewertung: Bestandsbewertung -Artikel** - Die Gliederung des Abfrageergebnisses nach **Status** ist nicht mehr möglich, um Performance-Probleme zu vermeiden.

- Ergebniskategorie **Kunden, Verkäufe**
 - Aufgrund der Neueinführung des Rezeptstatus **Ersatzverordnung** wurde die vordefinierte Abfrage **Theoretische Zuzahlungsliste** angepasst, d.h. der Rezeptstatus **Ersatzverordnung** wird ab sofort automatisch von der Abfrage ausgeschlossen. Für die Erstellung einer Zuzahlungsliste in der Ergebniskategorie **Kunden** steht Ihnen dieses Kriterium jetzt als Bedingung bzw. als Filter zur Verfügung.

Bedingung für das Feld "Rezeptstatus"

<input checked="" type="checkbox"/>	Rezeptstatus
<input checked="" type="checkbox"/>	Zuzahlungspflichtig/Mehrkostenpflichtig
<input checked="" type="checkbox"/>	Sprechstundenbedarf
<input checked="" type="checkbox"/>	Rezept nach § 27a SGB V
<input checked="" type="checkbox"/>	Zuzahlungsfrei/Mehrkostenfrei
<input checked="" type="checkbox"/>	Zuzahlungspflichtig/Mehrkostenfrei/HM-frei
<input checked="" type="checkbox"/>	Zuzahlungsfrei/Mehrkostenpflichtig/HM-pflichtig
<input checked="" type="checkbox"/>	Zuzahlungspflichtig/Mehrkostenfrei/HM-pflichtig
<input checked="" type="checkbox"/>	Kinderrezept
<input checked="" type="checkbox"/>	BG-Rezept
<input checked="" type="checkbox"/>	Ersatzverordnung (ZUfrei, MKpfl.)
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflegehilfsmittel

Ergebnisse ohne Wert anzeigen

OK Abbrechen

11 DATEV

11.1 Neue Steuerschlüssel nach DATEV-Vorgaben

Modul: Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: Neue Steuerschlüssel nach DATEV-Vorgaben

Neu/geändert:

Aufgrund der MwSt-Änderung zum 01.01.2020 hat DATEV zwei neue Steuerschlüssel eingeführt. Um bei Bedarf auch die Steuerschlüssel entsprechend den DATEV-Vorgaben in IXOS setzen zu können, wurden die Steuerschlüsselbezeichnungen ergänzt.

In IXOS können Sie somit folgende Steuerschlüssel bei Ein- und Auszahlungskonten verwenden:

IXOS-Bezeichnung	Steuerschlüssel	Bis 30.06.2020	Ab 01.07.2020	Ab 01.01.2021
Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)	1			
ermäßigte Umsatzsteuer	2	7%	5%	7%
volle Umsatzsteuer	3	19%	16%	19%
historische ermäßigte Umsatzsteuer	4	-	7%	5%
historische volle Umsatzsteuer	5	16%	19%	16%
historische ermäßigte Vorsteuer	6	-	7%	5%
historische volle Vorsteuer	7	16%	19%	16%
ermäßigte Vorsteuer	8	7%	5%	7%
volle Vorsteuer	9	19%	16%	19%

12 Systemeinstellungen

12.1 Reihenfolge der Berechnungsbasis im Auswahlfenster "Bevorzuge Berechnungsbasis" geändert

Modul: Systemeinstellungen, Kasse

Anwendungsfall: Die Reihenfolge im Auswahlfenster "Bevorzugte Berechnungsbasis" ist geändert worden

Neu/geändert:

Reihenfolge sieht wie folgt aus:

- Eigen-VK
- Apo-VK
- Durchschnitts-EK
- Effektiver-EK
- Buchungs-EK
- Eigen-EK
- Apo-EK

13 App "Meine Apotheke"

13.1 Rezept Abo für Dauermedikationen aktivieren

Modul: Systemeinstellungen, App "Meine Apotheke"

Anwendungsfall: Rezept Abo für Dauermedikationen aktivieren

Neu/geändert:

Für Nachbestellungen von Dauermedikationen bietet die App "Meine Apotheke" Ihren Kunden eine Rezept-Abo Funktion an. Der App-Nutzer erhält 14 Tage vor Erreichen der Reichweite des Artikels eine Hinweismeldung auf seinem Smartphone. Löst er eine Bestellung aus, erhalten Sie diese Information in IXOS als Notes-Aufgabe.

Möchten Sie Ihren Kunden das Rezept-Abo anbieten, aktivieren Sie diesen Dienst mit dem Konfigurationsparameter **Rezeptabo erlauben**. Diesen finden Sie in den Systemeinstellungen der **Systempflege**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite **App meine Apotheke**.


13.2 Auswertung aller registrierter App-Kunden

Modul: Reports

Anwendungsfall: Abfrage erstellen

Neu/geändert:

Im Modul **Reports** unter der Ergebniskategorie **Kunden** haben Sie die Möglichkeit eine Auswertung zu erstellen, die alle Kunden zeigt, welche die App **Meine Apotheke** aktiviert haben. Nutzen Sie dazu unter **Stammdaten** das Feld **Meine Apotheke**.

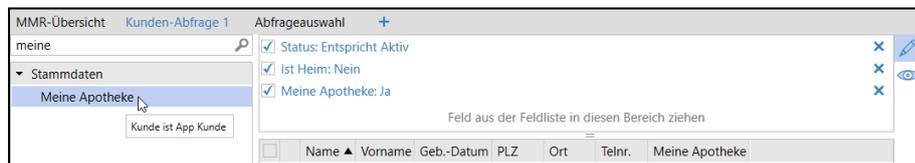

13.3 QR-Code auf Kassenbon optimiert

Modul: Systemeinstellungen, App "Meine Apotheke"


Anwendungsfall: Info-Code auf Kassenbon drucken

Neu/geändert:

Möchten Sie ihren Kunden einen schnellen Zugang zur App 'Meine Apotheke' anbieten, haben Sie bereits die Möglichkeit, einen Infocode (QR-Code) auf den Kassenbon zu drucken. Die Funktionalität des QR-Codes wurde optimiert.


Beim Scann des Infocodes gelangt der interessierte Kunde nun direkt zur App 'Meine Apotheke' im App-Store und kann sofort die Installation starten.

Sollte der Kunde keinen QR-Code Scanner auf seinem Mobilgerät installiert haben, ist auch die Eingabe des auf dem Kassenbon angegebenen Link möglich.

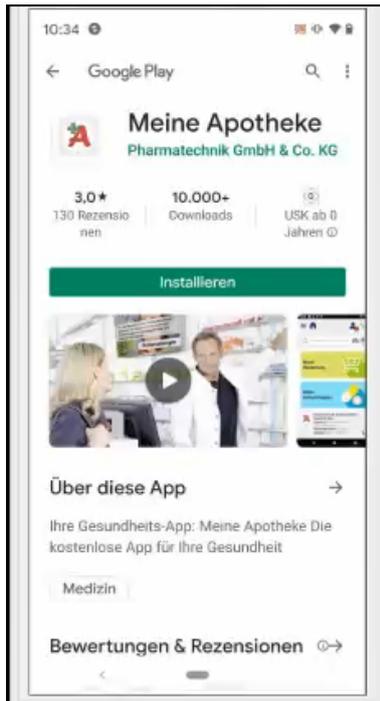

Ist die Installation abgeschlossen, erfolgt die schnelle und einfache Onlineregistrierung. Nach Zustimmung der Nutzungsbedingung werden Ihre Apotheken-Informationen angezeigt.

Der App-Nutzer kann sich sofort mit Ihrer Apotheke verbinden.

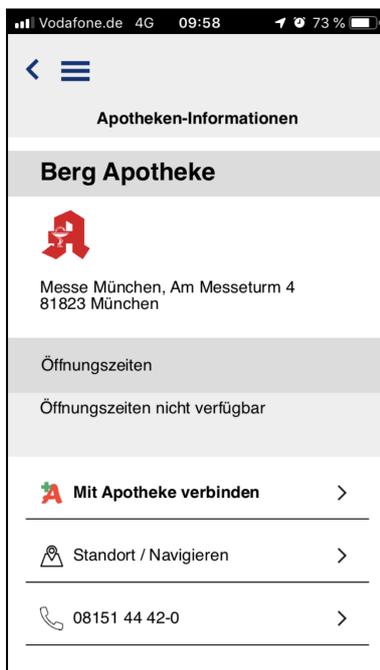


13.4 QR-Code zu Werbezwecken exportfähig

Modul: Firmenstamm

Anwendungsfall: QR-Code exportieren

Neu/geändert:

IXOS generiert einen QR-Code, damit Ihre potentiellen Kunden schnell und einfach die App Meine Apotheke installieren und sich bei Ihrer Apotheke registrieren können. Dieser QR-Code steht auch für Ihre Werbezwecke zur Verfügung, bspw. zur Platzierung auf Flyer. Im Modul **Firmenstamm** auf der Seite **Connect** ist dieser QR-Code hinterlegt. Nutzen Sie die Funktion **QR-Code exportieren - F12** oder klicken Sie einfach auf den QR-Code, um diesen in Ihrem lokalen Dateiverzeichnis zu speichern.

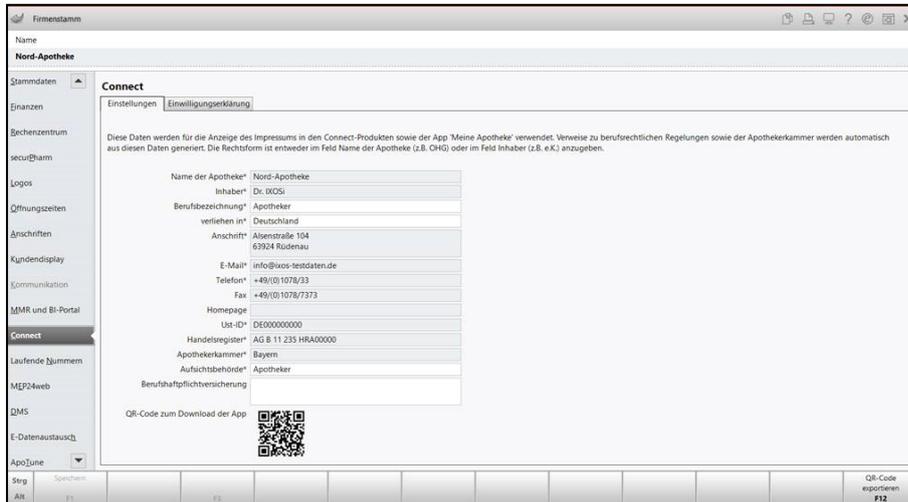

14 Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt

Zahlreiche neue Herausforderungen bestimmen täglich Ihren Apothekenalltag, insbesondere auch auf dem Gebiet der gesetzlichen Regelungen.

Zu folgenden aktuellen Themen im Apothekenmarkt können Sie sich jederzeit gerne auf unserer **PHARMATECHNIK**-Homepage informieren. Sie erhalten dort die aktuellsten Informationen auf einen Blick.

14.1 Aktuelles zu den eRezept Modellprojekten

Das eRezept wird in Zukunft die klassische Verordnung auf Papier im gesamten Gesundheitswesen ablösen. Mit unserer IXOS eRezept Lösung können Sie heute schon im Rahmen der Modellprojekte eRezepte empfangen. Bei Interesse erfahren Sie auf unserer Webseite mehr unter www.pharmatechnik.de/erezept

14.2 Aktuelles zum Konjunkturpaket MwSt-Senkung

Die Umsatzsteuer wird befristet vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 gesenkt. Der reguläre Steuersatz sinkt dabei von 19 % auf 16 %, der reduzierte Steuersatz von 7 % auf 5 %. **PHARMATECHNIK** als Ihr zuverlässiger Partner hat die notwendigen Softwareanpassungen in einem Update zur Verfügung gestellt, sodass Sie keine manuellen Einstellungen vornehmen müssen, um automatisch immer mit dem korrekten Mehrwertsteuersatz zu arbeiten. Ergänzend zu den Softwareänderungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.pharmatechnik.de/mwst umfangreiche Informationen, um Sie bestmöglich beim Umgang mit der MwSt.-Änderung zu unterstützen.

14.3 Änderung im Arbeitsablauf aufgrund der Corona-Situation

Das Coronavirus ist eine Herausforderung und verändert unseren Alltag. Kurzfristig geänderte Vorgaben und Entscheidungen können zu abweichenden Arbeitsabläufen mit IXOS führen. Wir möchten Sie dabei bestmöglich unterstützen. Umfangreiche Informationen dazu lesen Sie auf unserer Homepage www.pharmatechnik.de/corona Hilfreiche Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie unter folgendem Link: [IXOS FAQ zur Corona-Situation](#)

14.4 Aktuelles zur Telematikinfrastruktur

Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage [hier](#)

14.5 Aktuelles zur Kassensicherungsverordnung

Informationen auf unserer Homepage, FAQs zum Download und Webseminare finden Sie auf folgender Webseite: <https://www.pharmatechnik.de/kassensichv/>
Eine umfangreiche Sammlung an FAQs finden Sie auf folgender Webseite: <https://www.pharmatechnik.de/service/ixos-onlinehilfe-support/ixos-faq>

Zu diesen und vielen anderen Themen können Sie sich auch gerne auf unserem Web-Portal in der Rubrik [IXOS FAQ](#) informieren.

15 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

IXOS.eCall: Online-Support für IXOS

Wenn Sie Wünsche oder Fragen zur Funktionsweise von IXOS haben, dann können Sie direkt aus dem Modul **Notes**, Kategorie **Nachrichten** mit der Funktion **IXOS.eCall** den **PHARMATECHNIK**-Online-Support kontaktieren. Damit ist ein reibungsloser Ablauf in der Apotheke ohne Wartezeit am Telefon sowie ein effektiver Ablauf in der **PHARMATECHNIK**-Hotline gewährleistet.

Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support

Sie erhalten Hilfestellungen und Informationen, damit Ihr Anliegen schnellstmöglich geklärt werden kann. Sie finden hier die Kontaktdaten der **Hotline**, Formulare für **Supportanfragen**, **Frequently Asked Questions**, die **IXOS-Onlinehilfe**, **Support-Dokumente**, den **Release-Plan**, Informationen zu **Produktschulungen** sowie ein Bestellformular für **Verbrauchsmaterialien**. Das Web-Portal des **Online-Supports** können Sie jederzeit entweder unter www.pharmatechnik.de/online-support oder aus dem Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support** oder per Fax an die **08151 / 55 09 296** erreichen.

Service-Hotline: 08151 / 55 09 295

Als **IXOS**-Anwender erreichen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer **08151 / 55 09 295**. Damit Sie die Rufnummer jederzeit griffbereit haben, wird diese auf dem IXOS Desktop links oben - unter dem Namen Ihrer Apotheke - angezeigt.

Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Onlinehilfe - Alt+F1' wählen

Die **IXOS** Onlinehilfe liefert Ihnen Beschreibungen und Informationen für alle neuen sowie häufig verwendeten Funktionen.

Wenn Sie sich z.B. beim Arbeiten nicht sicher sind, wie der aktuelle Vorgang weiter bearbeitet werden soll, wählen Sie das Hilfe-Icon  am rechten Rand der Navigationsleiste bzw.  rechts in der Titelleiste von Fenstern oder **Onlinehilfe - Alt+F1**.

 Die Onlinehilfe öffnet sich in einem neuen Fenster.

Sie erhalten dann automatisch Informationen zur laufenden Anwendung. In den meisten Fällen sind diese kontextsensitiv, d.h. sie beziehen sich direkt auf die Funktion, die Sie gerade verwenden.



Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen

Sie können sich in der Onlinehilfe schnell über die neuesten Funktionen der aktuellen Version informieren. Rufen Sie zunächst mit **Onlinehilfe - Alt+F1** die Onlinehilfe auf.

Klicken Sie dann im Inhaltsverzeichnis links auf das Buch **Das ist neu**.

 Das Hilfethema mit den aktuellen Neuerungen öffnet sich.

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:

- **Versionsbeschreibung** aufrufen.
- Direkt zu den ausführlichen Beschreibungen der wichtigsten Neuerungen springen.
- **Versions-Historie** aufrufen. Hier finden Sie die Neuerungen der letzten Versionen und können direkt auf deren Beschreibungen zugreifen.